


PAKET I VODIČ ZA PACIJENTA



Nosivi EKG senzor

Holter EKG, 24-satno snimanje

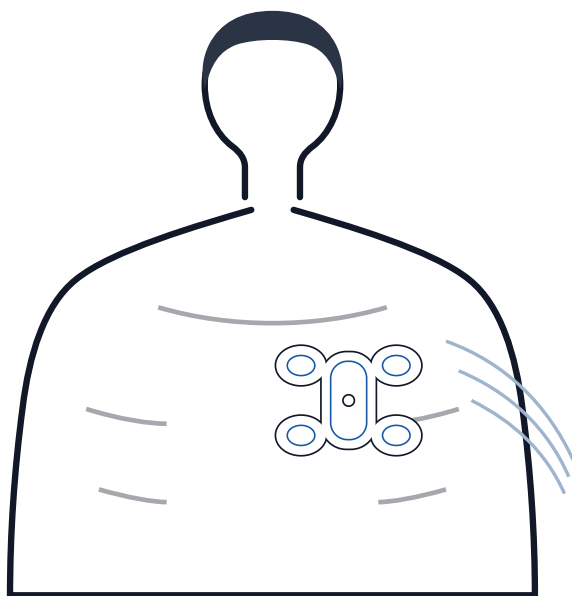

HOLTER SNIMANJE, JEDNOSTAVNO

Propisano vam je Holter snimanje, kontinuirano bilježenje EKG-a, odnosno električne aktivnosti vašeg srca. Podaci o radu srca automatski se prenose sa senzora, preko vašeg pametnog telefona s Holterservice aplikacijom, na siguran poslužitelj gdje se analiziraju i pripremaju u nalaz koji pregledava vaš liječnik.

ŠTO JE OBUHVAĆENO

A



POSTAVLJANJE SENZORA

Jednostavni koraci za postavljanje senzora na prsa.

B



POVEZIVANJE SENZORA

Preuzmite aplikaciju i povežite je sa senzorom.

C



SKIDANJE SENZORA

Na kraju snimanja skinite senzor s prsa.


VIŠE INFORMACIJA



Skenirajte QR kod telefonom za dodatne upute i odgovore na česta pitanja.

holterservice.eu/za-pacijente


1

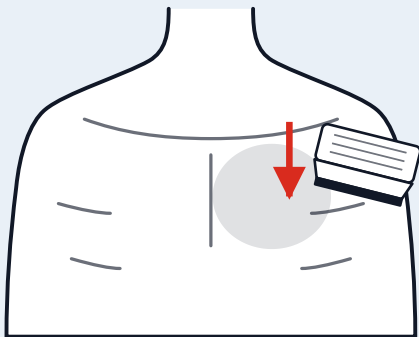

OBRIJTE DLAKE NA PRSIMA

Po potrebi obrijte cijelu lijevu stranu prsa priloženom britvicom.


2

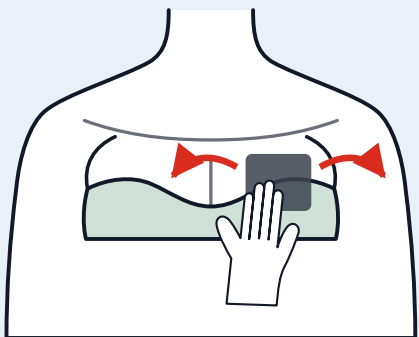

PRIPREMITE KOŽU

Priloženom dezinfekcijskom maramicom očistite područje na prsima.

3

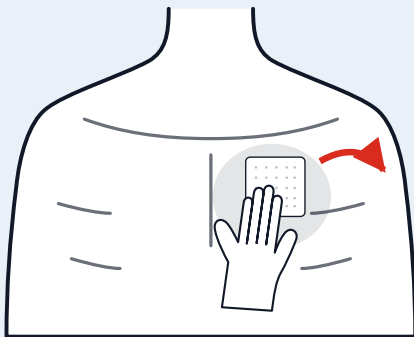

OSUŠITE KOŽU

Osušite područje na prsima priloženim jastučićem od vate.


4



NAVUCITE RUKAVICE

Prije uporabe ljepljive maramice navucite priložene rukavice.


5

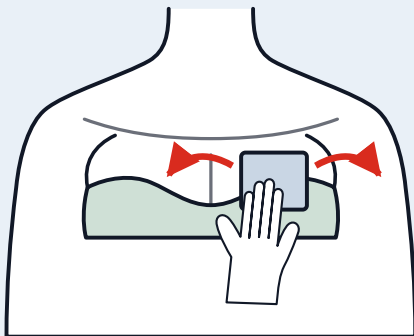

NANESITE LJEPILO

Utrljajte ljepljivu maramicu u područje na prsima i pričekajte da se koža potpuno osuši.


6

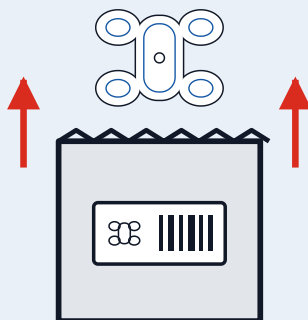

IZVADITE SENZOR

Izvadite senzor iz srebrne vrećice.


7

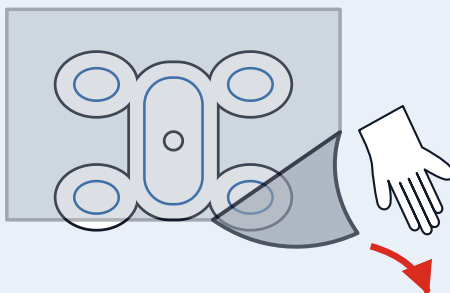

SKINITE ZAŠTITNU FOLIJU

Polako skinite zaštitnu foliju sa senzora, počevši od jednog ugla.


8

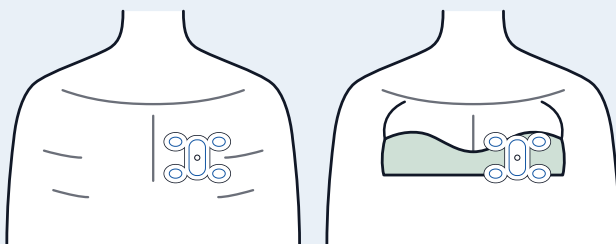

POSTAVITE SENZOR

Zalijepite senzor na prsa, ispod ključne kosti, lijevo od prsne kosti.

9

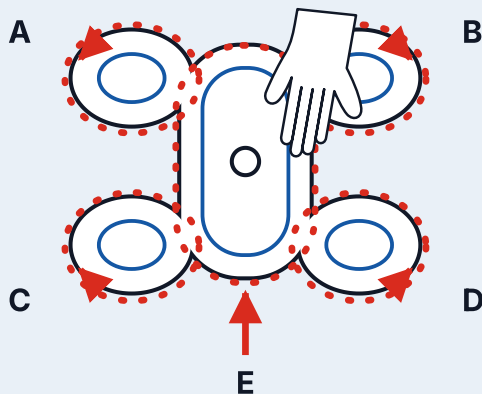

PRITISNITE SENZOR UZ KOŽU

Prstom čvrsto pritisnite redom A, B, C i D, pa središnji dio E. Ponovite postupak 10 puta.



Nakon postavljanja senzora ograničite aktivnosti barem jedan sat kako bi se senzor u potpunosti zalijepio za kožu.



Sačuvajte ovaj vodič do kraja snimanja.

↓ POVEZIVANJE SENZORA

1



ILI


🔍 holterservice.eu/za-pacijente



PREUZMITE APLIKACIJU

Skenirajte QR kod ili u pregledniku otvorite holterservice.eu/za-pacijente. Ondje se nalaze upute za preuzimanje Holterservice aplikacije za iPhone i Android.

2

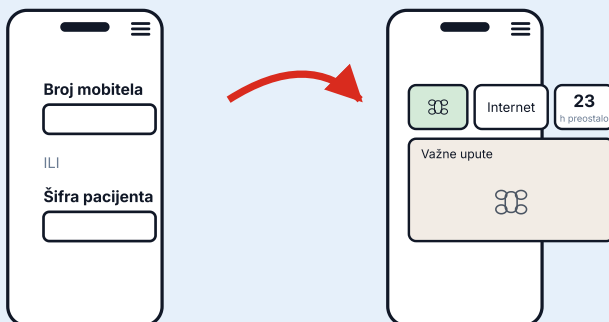


PRIJAVA I UKLJUČIVANJE SENZORA

Prijavite se u aplikaciju brojem mobitela ili šifrom pacijenta. Pritisnite tipku na senzoru, zabljesnut će zeleno svjetlo. Slijedite upute u aplikaciji za početak snimanja. Snimanje je aktivno kada je pločica u lijevom kutu zelena i kada je prikazana šifra senzora.

KORIŠTENJE APLIKACIJE

Dok nosite senzor nastavite sa svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima. Aplikaciju otvorite kad vas na to podsjeti ili kad želite zabilježiti simptom.

Važne upute

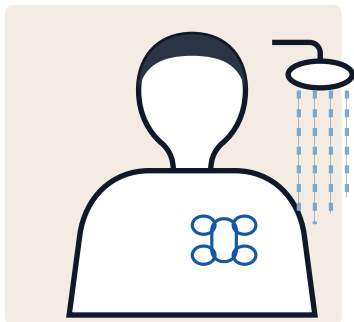

Tuširajte se okrenuti leđima prema mlazu vode. Senzor nikada ne uranjajte u vodu.



Aplikacija će vam davati važne upute i obavijesti o nošenju senzora.

Odaberite jedan ili više simptoma

Slučajan pritisak tipke

Tjeskoba

Bol u prsima

Vrtoglavica

Ubrzan rad srca

Umor

Lupanje srca

Nedostatak zraka

Nesvjestica



Dalje

Simptom možete zabilježiti pritiskom na tipku senzora i unosom detalja u aplikaciju.



Ako se rub senzora odlijepi, pritisnite ga natrag uz kožu. Ako se senzor odvoji u cijelosti, javite se ustanovi u kojoj ste preuzeli paket.



Aplikacija prikazuje koliko je snimanja preostalo. Senzor nosite do kraja tog razdoblja.



Senzor skinite tek nakon što aplikacija potvrdi da je snimanje završeno.




Sinkronizacija završena



Snimanje završeno


Pričekajte dok se u aplikaciji ne prikažu obje potvrde.

1

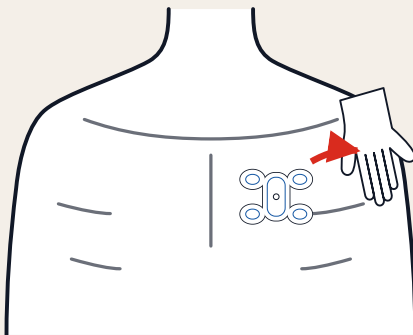

SKINITE SENZOR

Polako odlijepite senzor počevši od jednog ugla. Dok skidate senzor, kožu trljajte priloženom maramicom za uklanjanje ljepljivosti.

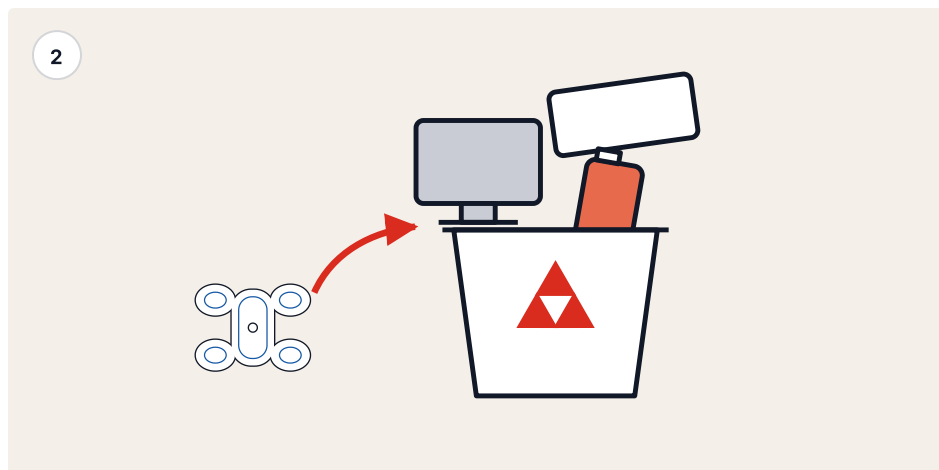

ZBRINITE SENZOR

Senzor zbrinite u skladu s lokalnim propisima i smjernicama za električni i elektronički otpad.

SADRŽAJ

Nosivi EKG senzor, paket za pacijenta.

IZDAVAČ

Holterservice

holterservice.eu

Nalaz očitava i potpisuje specijalist kardiologije.

VERZIJA

Vodič za pacijenta, verzija 1.0, kolovoz 2026.

Ovaj vodič je informativni i promotivni materijal Holterservicea. Nije uputa za uporabu medicinskog proizvoda i ne zamjenjuje upute proizvođača uređaja ni savjet vašeg liječnika.



HOLTERSERVICE

by Poliklinika Dr. Obad

Holter EKG i Holter KMAT u vašem mjestu, bez putovanja.
holterservice.eu

Informativni i promotivni materijal. Nije uputa za uporabu medicinskog proizvoda.

